
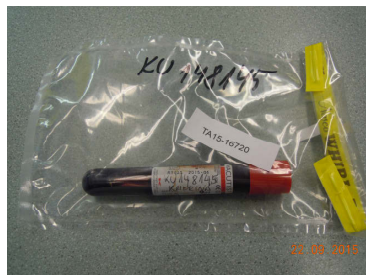


Kütitud metssigadelt sigade Aafrika katku (SAK) uuringuks proovide võtmine, pakkimine ja laborisse saatmine

- **Uuringu teostamiseks on vajalik võtta vereproov**
- Kasuta vereseerumi katseklaasi (küsi kohalikust veterinaarikeskusest).
- Sule katseklaas korralikult, veendu et see ei leki
- Kirjuta katseklaasile veekindla markeriga proovi ID (jahiloo number või küttimise järgsel esmakontrollil omistatud number)
- Pane katseklaas puhtasse plastkotti ning sule kott korralikult. Võimalusel kasuta soonsulguriga (Minigrip) või traadiga suletavat plastkotti
- Plastkotile kirjuta veekindla markeriga uuesti proovi ID
- Kui korraga kogud proove mitmelt metssealt, siis veendu, et iga katseklaas on korralikult suletud ning korrektselt märgistatud. Katseklaasid võid panna ühte plasttopsi ning seejärel pakendada plastkotti, sule kott korralikult
- Vii proovid esimesel võimalusel kohalikku veterinaarikeskusesse või volitatud veterinaararstile. Kui see pole võimalik hoia proove jahedas (+4...+6°C), ära külmuta!
- Täida kaaskiri loetavalt
 - Kirjuta kindlasti jahiloo number, e-posti aadress ja kontakttelefon
 - Pea silmas, et ka kõik ülejäänud andmed on samuti olulised
- VTL Tartu labor võtab sigade Aafrika katku proove vastu ka töövälistel aegadel

Näiteid korrektselt märgistatud ja pakitud proovidest:

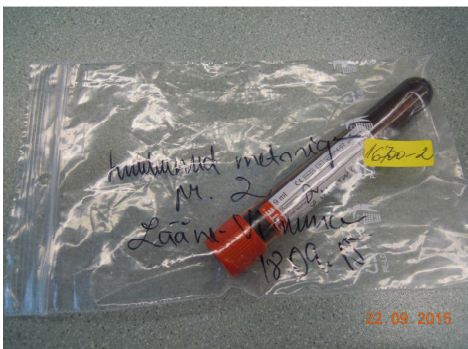

Väldi nn süstalkatsutit ja muid pakendamisiise, kuna labori ja keskkonna saastamise oht on suurem

